


## ヒノキチオール分析

### Hinokitiol

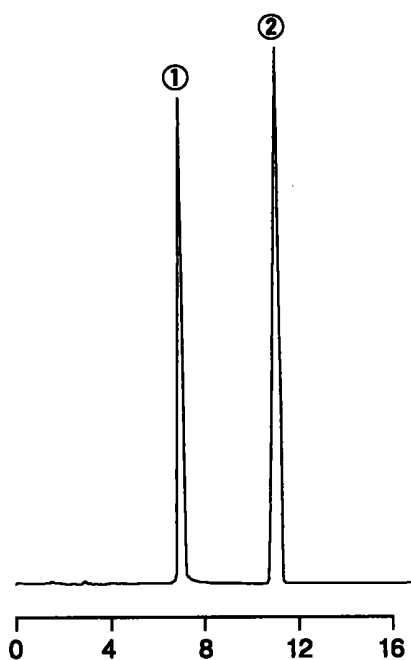

#### Analytical Conditions

Column	: L-column ODS 4.6mm × 150mm
Mobile phase	: Acetonitrile/ 20mM H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> =4/6
Flow rate	: 1mL/min
Temp.	: 40
Detector	: UV254nm 0.128AUFS
Injection volume	: 20 μ L
Sample	: ヒノキチオール (Hinokitiol) ベンゼン (Benzene)

①ヒノキチオール

