


プロカインアミドの分析

Procaineamides

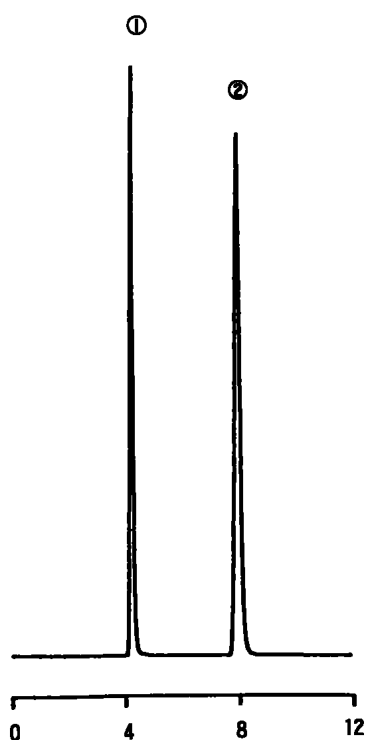

Analytical Conditions

Column	: L-column ODS 4.6mm × 150mm
Mobile phase	: Acetonitrile/ 20mM NaH ₂ PO ₄ =8/92
Flow rate	: 1mL/min
Temp.	: Ambient
Detector	: UV270nm 0.16AUFS
Sample	: 塩酸プロカインアミド (Procainamide Hydrochloride) 塩酸 N-アセチルプロカインアミド (N-Acetylprocaineamide hydrochloride)

①塩酸プロカインアミド



②塩酸N-アセチル
プロカインアミド

