Application No.8203

空気中のアセトアルデヒドの分析

Analysis of Acetaldehyde

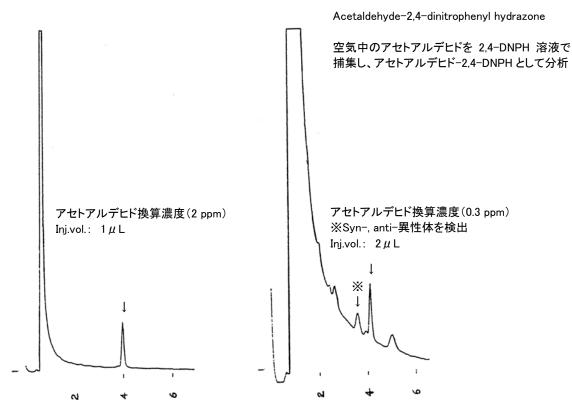


Fig. Chromatogram of Acetaldehyde.

[Analytical conditions]

G-column G-230 20 m L. \times 1.2 mm I.D. 0.5 μ m film thickness Column:

Flow rate: He 30 mL/min

220°C C.Temprature: FID Detection: Injection volume: 1μ L, 2μ L

System:

* リードキャピラリー(RN-7, 0.53 mm I.D.)接続



東京事業所 クロマト技術部

and Research Institute, Japan Chromatography Department, CERI Tokyo

URL:http://www.cerij.or.jp

埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野 1600 番地 〒345-0043 TEL 0480-37-2601 FAX 0480-37-2521 E-mail: chromato@ceri.jp